



Technical & General
London

Дентални продукти

www.tgbulgaria.com

Техникал енд Дженерал - България е официален представител на английската фирма Technical & General Ltd, чиято дейност е производство и разпространение на дентални продукти с високо качество на достъпни цени.

Фирмата предлага безплатна доставка в цялата страна, без значение от сумата на поръчката. Продуктите се доставят от куриерска фирма, а заплащането става чрез наложен платеж. Можете да направите Вашата поръчка по телефона, e-mail или чрез нашия електронен магазин (www.tgbulgaria.com). Също така може да закупите нашите продукти на адресите посочени по - долу.

Очакваме ви!

Безплатна доставка в цялата страна !

Контакти:

Централен офис

гр. София, ул. Проф. Г. Брадистилов № 4

тел.: 02 / 423 03 87

моб.: 0889 89 50 23

e-mail: tgdent@abv.bg

Магазин - 10 % отстъпка при покупка на място

гр. Пловдив, пл. Понеделник пазар № 5,

ДКЦ 1 - Пловдив, ет. 4

тел.: 0988 934 675

www.tgbulgaria.com

Съдържание

Фотокомпозици.....	1 - 4
Химичен композит.....	5
Амалгама.....	6
Бондинг системи.....	7 - 8
Двойно полимеризиращи цименти.....	9
Гласйономерни цименти.....	10 - 12
Цименти.....	13 - 14
Временни материали и цименти.....	15 - 19
Подложки.....	20 - 21
Силанти.....	21
Запечатващ лак.....	22
Ортодонтски адхезив.....	22
Материали за временно запълване на кореновия канал.....	23 - 24
Материали за постоянно запълване на кореновия канал.....	24 - 25
Материали за дезинфекция на кореновия канал.....	26
Щифтове.....	27
Канални инструменти.....	29 - 30
Отпечатъчни материали.....	31 - 32
Пистолети за картуши.....	33
Универсално масло.....	34
Платна за кофердам.....	34
Профи паста.....	35
Четка за почистване на инструменти.....	35
Гуми и четки за полиране.....	35
Игли за карпула.....	36
Ефервесцентни таблетки за уста.....	36
Пликове за автоклав.....	37
Дезинфектанти.....	38 - 44



Приложение:

- Възстановяване на всички класове кавитети.
- Директни вставки (инлеи и онлеи).
- Изграждане на щифтове.

Предимства:

- Отлични качества за моделиране и полиране.
- Оптимални механични качества, не залепва.
- Малко полимеризационно свиване и голяма стабилност.
- Изключителна естетика.
- За перфектно маргинално запечатване се използва СВС техника.

Състав:

Barium Glass / Silicone dioxide	77%
Bis-GMA-Based Dental Resins	22.50%
Additives , pigments , catalysts	0.50%
total inorganic fillers contents	57% of Volume
Големина на частиците	0,7 μm

Опаковка:

- 1 шприца (3 гр.) - **33,00 лв**
- 3 шприци (9 гр.), 5 мл tgbond, 2,5 гр. ецващ гел - **115,00 лв**
- 7 шприци (21 гр.), 5 мл tgbond, 5 гр. ецващ гел - **210,00 лв**
- 7 шприца (21 гр.), 5 мл самоецващ еднокомпонентен бонд - **250,00 лв**

Производител: Technical & General, Германия



Приложение:

- Универсален композит за всички видове кавитети.
- Индиректно изработване на инлеи, онлеи и фасети.

Предимства:

- Директно възстановяване на всички класове кавитети във фронталния и дъвкателния участък (антериорени постериорен).
- Устойчив на фрактура.
- Отлично полиране и моделиране.
- Малко полимеризационно свиване.
- Оптимални механични качества.
- Отлична естетика.
- Големина на частиците 0,4 μm .

Състав:

Silanated Barium Glass	67-77%
Bisphenol A Diglycidyl Methacrylate	19-23%
1,6 Hexanediol Dimethacrylate	5-8%
Fumed Silica	3-6%
Ethyl 4 Dimethylamino benzoate	<1%
Camphorquinone	<0.5%
Titanium Dioxide	<0.5%
Dye(IronOxides)	<0.5%
2,4 Dihydroxy Benzophenone	<0.5%
Butylated Hydroxy Toluene	<0.5%

Опаковки:

1 шприца (4,5 гр.) - **35,00 лв**

5 шприци (22,5 гр.), 2,5 гр. ецващ гел, 5 мл tgbond - **149,00 лв**

7 шприци (31,5 гр.), 2,5 гр. ецващ гел, 5 мл tgbond - **179,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



Приложение:

- Универсален композит за всички видове кавитети.
- Индиректно изработване на инлеи, онлеи и фасети.

Предимства:

- Директно възстановяване на всички класове кавитети (i-v) във фронталния и дъвкателния участък (антериорен и постериорен).
- Отлично полиране и моделиране.
- Оптимални механични качества.
- Устойчив на фрактура.
- Малко полимеризационно свиване.
- Отлична естетика.

Състав:

Barium Glass / Silicone dioxide	67%
Bis-GMA-Based Dental Resins	19.50%
Additives , pigments , catalysts	0.50%
total inorganic fillers contents	77%

Опаковки:

1 шприца (4,5 гр.) - **28,00 лв**

5 шприци (22,5 гр.), 2,5 гр. ецващ гел, 5 мл tgbond - **139,00 лв**

7 шприци (31,5 гр.), 2,5 гр. ецващ гел, 5 мл tgbond - **165,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



Приложение:

- Употреба при облицовки, инлеи и пълно възстановяване.

Показания:

- Възстановявания от клас III и V.
- Силанизиране на фисури.
- Възстановяване на млечни зъби.
- Блокиране на дефекти на повърхността, вследствие врязване на инструмента.
- Ерозии и абразии на шийката.
- Възстановявания клас II под композити (СВС техника, компомер съчетан с композит).

Предимства:

- Полира се добре и притежава отлични естетически свойства.
- Нисък вискозитет с отлично попиване.
- Малко свиване.
- Голяма якост при натиск.
- Може да се използва заедно с tg композити, за по-добра адаптация към граничните ръбове, като по този начин действа, като еластичен слой неутрализиращ напрежението в тези зони.

Състав:

Fumed Silica	6.26%
Silanated Barium Glass	53.28%
Sodium Fluoride	2.01%
Ethoxilated Bisphenol A Dimethacrylat	11.38%
Bisphenol A Diglycidyl Methacrylate	19.20%
Triethilene Glycol Dimethacrylate	5.23%
Reactives	2.64%

Опаковки:

- 1 шприца (2,3 гр.) - **25,00 лв**
- 2 шприци (4 гр.) - **47,00 лв**
- 3 шприци (7,2 гр.), 2,5 гр. ецващ гел - **60,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



Приложение:

- Универсален химиополимер за всички класове кавитети.

Предимства:

- Директно възстановяване във фронталната и дъвкателната област на всички класове кавитети.
- Отлична полируемост и възможност за моделиране.
- Оптимални механични качества.
- Устойчив на фрактура.
- Малко полимеризационно свиване.
- Отлична естетика.
- Универсални цветове.

Състав:

Silanated quartz-Barium Glass	31.00%
Triethylene Glycol Dimethacrylate	22.00%
1,6 Hexanediol	17.70%
Bisphenol A Diglycidyl Methacrylate	13.70%
Ethoxilated Bisphenol A Dimethacrylate	10.80%
N,N-Dihydroxy Ethyl-p-Toluidine	3.00%
Benzophenone-1	1.38%
Butylated Hydroxy Toluene	0.40%
2-Hydroxy Ethyl Methacrylate	0.02%

Опаковка:

14 гр. база, 14 гр. катализатор, 6 мл бонд, 9 мл ецващ гел - **56,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Предимства:

- Смес от струговани и сферични частици, което улеснява процеса на кондензация с щопфери с малък диаметър.
- Доказали се отлични механични качества, които осигуряват дълготрайна и добре полирана обтурация.
- Морфологията, еднородният химичен състав и разпределението на частиците позволяват смесване чрез високо- и нискоскоростни амалгамобъркачки без риск от неравномерно разпределение.
- Голяма здравина веднага след поставянето, което помага на изграждането на стабилна маргинална връзка и намалява риска от фрактури през първите часове.
- Няма прахообразни частици, които причиняват висока течливост и различна експанзия.
- Лесно оформяне на здрави маргинални ръбове поради отсъствието на частици с груба форма, които при отстраняване оставят неравна шуплеста повърхност.
- Не съдържа цинк и по този начин елиминира проблеми, които могат да възникнат от влагата при обтуриране.
- Много малкото „статично“ пълзене, предотвратява отлепването от маргиналните ръбове.

45 % Сребро



Състав:

Ag 45%, Cu 24%, Sn 31%

Опаковка:

Амалгама капсули - 1 бр.

1 доза - **1,45 лв**

2 дози - **1,65 лв**

3 дози - **2,00 лв**

Амалгама прах 30 гр. - **86,00 лв**

68,4 % Сребро



Опаковка:

Амалгама капсули - 1 бр.

1 доза - **1,65 лв**

2 дози - **2,00 лв**

3 дози - **2,40 лв**

Амалгама прах 30 гр. - **115,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Приложение:

- Подходящ за всички видове фотополимеризиращи и самополимеризиращи композити, компомери и ормоцери.
- За дентин и емайл.
- Съвместим с всички широко разпространени продукти.

Предимства:

- Най-нова модерна технология (7-мо поколение).
- Много висока устойчивост.
- Лесно и спестяващо време приложение само с една стъпка.
- Само едно нанасяне.
- Няма следоперативна чувствителност.
- Надеждна дълбочина на деминерализация.

Опаковка: 5 мл, 25 бр. апликатори - **89,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

**Приложение:**

- Фотополимеризиращ еднокомпонентен адхезив, подходящ за всички композиции, компомери и ормоцери.
- Осъществява здраво прилепване към зъбното вещество.

Предимства:

- Силна връзка между бонда и всички фотополимеризиращи obturative materials.
- Лесна и времеспестяваща апликация.
- Отлично омекряне на емайла и дентина.
- Праймер и адхезив в едно шише.

Състав:

Еластомер

HEMA

TEDMA

Ацетон

Катализатор / стабилизатор

**Опаковка:**

5 мл бонд, 2,5 гр. ецващ гел, 25 бр. апликатори - **60,00 лв**

5 мл Бонд - **55,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

tgbond Фотополимеризиращ бонд за емайл и дентин

Приложение:

- Фотополимеризиращ еднокомпонентен адхезив подходящ за всички видове композити, компомери и ормоцери.

Предимства:

- Много висока сила на свързване с всички фотополимеризиращи композити.
- Лесна и времеспестяваща апликация.
- Отлично омокряне на емайла и дентина.
- Праймер и адхезив в едно шише.

Състав:

Bisphenol A Diglycidyl Methacrylate	54.90%
Tri ethylene Glycol Dimethacrylate	44.20%
Butylated Hidroxy Toluene	<0.1%
2-N,N-Dimethyl aminopropyl methacryla	<1.0%

Опции:

- На водна основа
- На алкохолна основа

Опаковка:

3 мл - **24,00 лв**

5 мл - **40,00 лв**



Производител: Technical & General, Англия

tgblue gel

Ецващ гел

Приложение:

- 37% ортофосфорна киселина

Предимства:

- Остава на място и не се разтича към открити тъкани.
- Предоставя възможност за прецизно поставяне в относително недостъпни места.
- Отмива се лесно с вода.
- Тиксотропни свойства.

Състав:

Phosphoric Acid	41.90%
Gelable Agent	16.10%
Bidestilled Water	42.00%

Опаковка: 4 шприци (10 гр.) - 20,00 лв



Производител: Technical & General, Англия



Приложение:

- За постоянно циментиране на инлеи, онлеи, корони, мостове, фасети.

Предимства:

- Съчетава свойствата на гласйономерите и композитите.
- Идеален за циментиране на мостове с maryland крепители, фасети и керамични възстановявания.
- Перфектно се слива със всяка obturation, създава здрава връзка, особено с амалгамени obturation.
- Течлив, но не леплив, което позволява образуването на слой с дебелина по - малка от 15 микрона.
- Рентгеноконтрастният бариер пълнител в комбинация с композитния матрикс гарантира голяма абразивоустойчивост.
- Голяма механична здравина.
- Продължително освобождаване на флуорни йони.

Състав:

Silanated Barium Glass	45.30%
Sodium Fluoride	8.00%
Ethoxilated Bisphenol A Dimethacrylat	21.50%
Bisphenol A Diglycidyl Methacrylate	13.10%
Triethilene Glycol Dimethacrylate	3.90%
Reactives	8.20%

Опаковка:

2 шприци база (4,6 гр.), 2 шприци катализатор (4,6 гр.) - **50,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Приложение:

- За obturации при клас III и V.
- Тунелни препарации.
- Кариес на корена и препарации.
- Поставяне под пломбата при млечни зъби.

Предимства:

- Отлична естетика: опакитет, сравним с композитите.
- Удължено работно време.
- Висока абразивоустойчивост.
- Много малка ранна разтворимост.
- Отлична връзка с дентина и емайла.
- Универсални разцветки.
- Ултра тънък слой: 15 микрона.
- Рентгеноконтрастен.

Състав:
Прах:

Aluminium fluoride	34.00%
Silicone dioxide	29.00%
Aluminium phosphate	10.00%
Aluminium oxide	17.00%
Sodium fluoride	3.00%
Calcium phosphate	trace%
Calcium oxide	trace%
Quartz	trace%

Течност:

Heavy Molecular Weight	59.00%
Accelerator	1.00%
Water h2o	30.00%
Tartaric acid	10.00%



Опаковка: 20 гр. прах, 15 мл течност, 10 гр. tgvarnish - **55,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Приложение:

- За циментиране на корони, мостове и щифтове.
- Формира здрава връзка с дентина.
- Идеален и за употреба под композитни изграждания, тъй като се свързва еднакво здраво със смолите и дентина.
- Избягва се пост - оперативна чувствителност.
- Антикариесна активност и лечебен ефект върху зъбните тъкани благодарение отделянето на флуорни йони.
- По време на поставяне не излиза извън контурите на кавитета, позволява незабавно продължаване на клиничната работа.

Предимства:

- Осигурява здрава връзка със зъба и obturation.
- Здравата връзка към дентина и отделянето на флуорни йони осигуряват антикариесен ефект и здравина на конструкцията.
- Добра устойчивост на дъвкателните сили.
- Универсална разцветка.
- Ултратънък слой: 15 микрона.
- Рентгеноконтрастен.

Състав:
Прах:

Aluminium fluoride	34.00%
Silicone dioxide	29.00%
Aluminium phosphate	10.00%
Aluminium oxide	17.00%
Sodium fluoride	3.00%
Calcium phosphate	trace%
Calcium oxide	trace%

Течност:

Polyacrylic acid	59.00%
Accelerator	1.00%
Water h2o	30.00%
Tartaric acid	10.00%



Време за смесване – 20 сек.

Време за работа – 2 мин.

Време за втвърдяване – 6 мин.от миксирането.

Опаковка: 20 гр. прах, 15 мл течност - 53,00 лв

Производител: Technical & General, Англия

Приложение:

- За покритие или подложка на кавитетната основа.
- Формира здрава връзка с дентина.
- Идеален и за употреба под композитни изграждания, тъй като се свързва еднакво здраво със смолите и дентина.
- Избягва се постоперативна чувствителност.
- Антикариесна активност и лечебен ефект върху зъбните тъкани благодарение отделянето на флуорни йони.
- По време на поставяне не излиза извън контурите на кавитета, позволява бързо последващо obtуриране.

Предимства:

- Осигурява здрава връзка със зъба и obtурацията.
- Здравата връзка към дентина и отделянето на флуорни йони осигуряват антикариесен ефект и здравина на конструкцията.
- Добра устойчивост на дъвкателните сили.
- Универсална разцветка.
- Ултра тънък слой: 15 микрона.
- Рентгеноконтрастен.

Състав:
Прах:

Aluminium fluoride	34.00%
Silicone dioxide	29.00%
Aluminium phosphate	10.00%
Aluminium oxide	17.00%
Sodium fluoride	3.00%
Calcium phosphate	trace%
Calcium oxide	trace%
Quartz	trace%

Течност:

Heavy Molecular Weight	59.00%
Accelerator	1.00%
Water h2o	30.00%
Tartaric acid	10.00%



Време за смесване – 20 сек.

Време за работа – 2 мин.

Време за втвърдяване – 6 мин. от миксирането

Опаковка: 20 гр. прах, 15 мл течност - 53,00 лв

Производител: Technical & General, Англия



Приложение:

- Циментиране на инлеи, корони, мостове и ортодонтски брекети.
- Подложки под всякакъв вид obturationни материали.
- Временно или постоянно obtуриране на зъби със съмнителна прогноза.

Предимства:

- Дългогодишни резултати с клиничен успех.
- Много добра връзка с дентина и емайла.
- Добра устойчивост на натиск и опън.
- Освобождава малки количества флуорни йони.
- В някои случаи елиминира постоперативната чувствителност.
- Отлична рентгеноконтрастност, позволяваща лесно откриване на субгингивален излишък и маргинални неточности.
- Толерантен към лека влажност.

Състав:

Прах:

Zinc oxide	24.00%
Silica flour	24.00%
Magnesium oxide	22.00%
Subnitrate bismuth	30.00%

Течност:

Water H ₂ O	15.00%
Zinc oxide	5.00%
Polycarboxylic acid	78.00%
Sodium hydroxide	2.00%

Опаковка: 50 гр. прах, 25 мл течност. - **18,00 лв**

Производител: **Technical & General, Англия**



Приложение: за циментиране на коронки и мостове.

Предимства:

- Дългогодишни резултати с клиничен успех.
- Добра адхезия.
- Отлична рентгеноконтрастност, позволяваща лесно откриване на субгингивален излишък и маргинални неточности.
- Голяма здравина и твърдост.
- Добра устойчивост на натиск и опън.

Състав:

Прах:

Zinc oxide	24.00%
Magnesium oxide	22.00%
Cilica flour	24.00%
Bismuth subnitrate	30.00%

Течност:

Phosphoric acid	66.00%
Water	19.00%
Zinc oxide	5.00%
Hydrated alumina	10.00%

Опаковка: 50 гр. прах, 25 мл течност - **12,00 лв**

Производител: **Technical & General, Англия**



Характеристика: цинков окис евгенолов цимент, състоящ се от прах и течност с различни екстракти, балсами и масла.

Приложение:

Хирургична превръзка:

- Да протектира оперирана или третирана повърхност от контакт с дразнещи субстанции и инфекции.
- Екстракции.
- Суха алвеола.
- Пародонтална хирургия.
- Инфекция на vincent.

Временен цимент за залепване на конструкции:

- Временен цимент за фиксиране на временни корони и мостове.
- Имедиатни коронки.
- Временни ребазации.

Временни obturации:

- Временен материал за запълване на кавитети.

Опаковка: 60 гр. прах, 30 мл течност - **36,50 лв**

Производител: Technical & General, Англия


Приложение:

- За временни obtyрации, особено в детската дентална медицина.
- При рампантен кариес, където деминерализираните тъкани трябва да бъдат отстранени, за да се намали концентрацията на кариесогенни бактерии и да се прекъсне процесът на разпространение на кариеса.
- Може да се използва за подложки и като временен цимент.
- Има предимството да протектира пулпата.

Състав:
Прах:

Zinc oxide (u.s.p)	74.80%
Natural acrylic (self)	13.13%
Propionicacid	2.90%
Aluminium oxide	9.17%

Течност:

Eugenol	97.36%
Acetic acid	2.64%

Опаковка: 30 гр. прах, 14 мл течност - **30,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



Приложение: временно циментиране на коронки и мостове.

Предимства:

- Не влияе и не пластифицира материали на базата на смоли.
- Леснен за разбъркване тип паста-паста.
- Особено подходящ за пациенти, чувствителни към евгенол.
- Предпазва пулпата от термични дразнения.
- 1,5 мин. работно време от началото на миксирането.
- 6 мин. за втвърдяване след старта на миксирането.

Състав:

База:

Zinc oxide	84.8 %
Olive oil	10%
Mineral oil	5%
Pigment	0.2%

Катализатор:

Rosin	65%
Nonanoic acid	35%

Опаковка: 60 гр. база, 20 гр. катализатор - **30,00 лв**

Производител: **Technical & General, Англия**

**Приложение:**

- Подходящ за временни obturации, подложени на оклузално натоварване.

Предимства:

- Лесно се поставя и отстранява.
- Осигурява херметическо затваряне на кавитета.
- Има отлична стабилност, след като се втвърди.
- Притежава висока устойчивост при натиск.

Състав:

Zinc Oxide 38%

Zinc Sulphate 30%

Ethanol 12 %

Polyvinyl acetate 20%

Опаковка: бяла (мека) / розова (твърда) паста - **8,00 лв**

Производител: **Technical & General, Англия**



Приложение:

Самополимеризиращ висококачествен 10:1 ди-акрилен материал за временни коронки и мостове, инлеи, онлеи и дълготрайни временни конструкции.

Предимства:

- Нищожно полимеризационно свиване.
- Подходящ за многочленни временни конструкции.
- Минимална екзотермична реакция.
- Оптимална биологична поносимост.
- Ниска полимеризационна температура, предпазва пулпата и гингивата от възпаление и увреждане.
- Не променя цвета си и се полира до блясък.

Състав:

Bis-GMA ethoxyl	35%
Barium glass	41%
Urethane dime- thacrylate oligomer	14%
Pyrogenic silica	3%
Polyster	5%
TEDMA	1%
Catalyst, stabilizer, pigments	1%

Налични цветове: A1, A2, A3, A3.5, B1

Опаковка: 50 мл (76 гр.), 10бр. смесителни накрайници - **117,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

tglinecal Classic Калциев хидроксид

Приложение:

- За директно пулпопокрите и подложка под obtурации.
- Не пречи на полимеризацията на акриловите и композитните obtурации.

Предимства:

- Защитна бариера между дентина и пулпата.
- Подходящ за употреба с амалгама, композити, запечатващи агенти и други obtурационни материали.
- Има адекватна течливост през първата половина от работното време.
- Рентгеноконтрастен.



Състав:

Calcium Hydroxide	45%
Barium Sulphate	5%
Water (Purified)	48%
Excipients	2%
pH	12



Опаковка: 13гр. база, 11гр. катализатор - **30,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

tglineCal Калциев хидроксид - готова паста

Приложение:


- Протективна подложка под всички obtурационни материали.
- При много дълбок кариес.
- Витална ампутация и директно пулпопокрите.

Предимства:

- Лесна за употреба и време-спестяваща апликация.
- Изсъхва за 15 сек.
- Намалява чувствителността на зъбите.
- Рентгеноконтрастна.
- Антисептична.
- Самополимеризираща.

Състав:

Calcium Hydroxide	45%
Barium Sulphate	5%
Water (Purified)	48%
Excipients	2%
pH	12

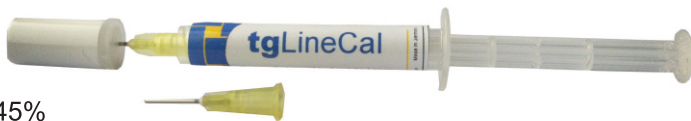

Опаковка: 2,5 гр. в спринцовка - **31,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Приложение:

Калциев хидроксид за подложка - фотополимеризиращ.

Предимства:

- Отлична биосъвместимост с дентина и пулпата.
- Неразтворим във вода и слюнка.
- Освобождава флуорни йони.
- Рентгеноконтрастен.
- Лесен за употреба.

Опаковка:

1 шприца (2,5 гр.), 5 накрайника - **23,50 лв**

2 шприци (5 гр.), 10 накрайника - **42,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



tgpit & fissure

Силант за неравности и фисури

Приложение:

- Фотополимеризиращ силант на основата на bis-GMA.
- Специално за запечатване на малки фисури, неравности и оклузални повърхности.

Предимства:

- Здрава връзка с емайла на зъба.
- Висока устойчивост на изтриване.
- Тиксотропни свойства.
- Отличен за пенетрация в много тесни фисури.
- Опакер с пригоден вискозитет.
- Трайност минимум 3 години.

Състав:

Calcium Hydroxide	35%
Silicone Oil	34%
Iodoform	25%
Excipients	6%

Опаковка: 2 шприци (6 гр.) силант, 3 гр. ецващ гел - **60,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



Приложение:

Прилага се върху стените на кавитета, като по този начин намалява проникването на течности в зъба.

Предимства:

- Свежда до минимум проникването на киселина от цименти за подложка, особено цинкфосфатните и силикатните цименти.
- Може да се използва за покриване на дентина при плитки кавитети, които ще се възстановяват със силикатен цимент, без да се нарушава антикариесогенният му ефект.
- В дълбоките кавитети, когато е в близост до пулпата, е добре да се поставя пулпна превръзка от калциев хидроксид, преди да се нанесе лакът.
- Отстранява чувствителността.

Състав:

Isopropoyl Alcohol	56.43%
cyclohexane	38.55%
Versamid	5.02%

Опаковка: 14 мл - **23,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



tgortho

Ортодонтски адхезивен комплект

Приложение:

Фиксиране на метални, керамични и пластмасови брекети.

Предимства:

- Освобождава флуорни йони.
- Вискозитет, позволяващ добро позициониране на брекета преди фиксиране.
- Елиминира разлепването на брекета и позволява лесно почистване.
- Лесно сваляне и заменяне на брекетите, без увреждане на емайла.

Състав:

Silanated Quartz	75.40%
Bisphenol A Diglycidyl Methacrylate	17.10%
Triethylene Glycol Dimethacrylate	6.10%
Sodium Fluoride	1.10%
Ethyl 4 Dimethylaminobenzoate	0.20%
Butylated Hidroxy Toluene	0.10%

Опаковка: 2 шприци (7 гр.) адхезив, 2,5 гр. ецващ гел, 3 мл бонд - **35,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия





Приложение:

- Временно каналопълнежно средство.
 - За апексфикация.
 - При ексудиращи канали и коренови резорбции.
 - Образува твърдотъканна бариера.
 - При ендодонтска травма при деца.
 - Рентгеноконтрастен.
-
- Използва се за временно и дефинитивно запълване на коренови канали.
 - Добавката на йодоформ има допълнителен антибактериален ефект.
 - Препоръчва се за лечение на травматични лезии и коренова резорбция.
 - Инжектира се в кореновия канал чрез ултрафини еднократни накрайници, които помагат за лесното аплициране в дълбочина на канала, като предпазва от кръстосана инфекция.
 - Може да се използва в комбинация с гутаперчови щифтове и обикновени канални силанти.
 - Показва високо ниво на алкалност в кореновия канал.
 - Високото pH компенсира киселинността, причинена от възпалението, като създава неутрална среда и по този начин дезинфектира кореновия канал.
 - В допълнение, тъй като някои спорообразуващи бактерии могат да оцелеят при високи нива на pH, добавката на йодоформ към tgrex осигурява възможност на тоталното им ерадикиране.
 - Течливата паста, която се използва като вехикулум, е химически инертна, намалява повърхностното напрежение, има свойството да лубрикира и не се влияе от влажност.
 - Поради тези причини е особено полезна при апексфикация на кореновите канали при зъби с незавършено кореново развитие (млечни или постоянни).
 - Йодоформът има антимикробни свойства, които проличават добре дори и една седмица след запълването.

Състав:

Calcium Hydroxide	35%
Silicone Oil	34%
Iodoform	25%
Excipients	6%

Опаковка: 2,2 гр. - 39,00 лв

Производител: Technical & General, Англия

Приложение:

- Временно каналопълнежно средство.
- За апексфикация и формиране на твърдотъканна бариера.
- Открита пулпа при директно покритие и пулпотомия.
- При ексудирални канали.
- Вътрешна и външна коренова резорбция.

Предимства:

- Лесно почистване и премахване, водоразтворим.
- Отличен антибактериален ефект и рентгеноконтрастност.
- Предварително миксирана паста.
- Еднократни аплициращи накрайници за предпазване от кръстосана инфекция.

Състав:

Calcium Hydroxide	30%
Barium Sulfate	35%
Polypropylene Glycol	35%



Опаковка: 2,2 гр. - **30,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Приложение: за постоянно запълване на коренови канали

Предимства:

- Не дразни периапикалните тъкани.
- Съдържа антисептични и антифлогистични компоненти.
- Не оцветява твърдите зъбни тъкани.
- Рентгеноконтрастност поради наличието на бариев сулфат.
- Запечатва херметически.
- Удобна течлива консистенция за лесна апликация.
- Дълго работно време.

Състав:

Прах:		Течност:	
Zinc oxide	47%	Eugenol	80%
Rosin	20%	Olive Oil	20%
Calcium phosphate	15%		
Bismuth subcarbonate	18%		



Опаковка: 20 гр. прах, 10 мл течност.- **31,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Приложение:

- За постоянно запълване на кореновите канали.
- На базата на епокси смола, тип паста - паста в двойна шприца.
- Има изключителни физически и химически качества, включително и запечатващи свойства.
- Подходящ за метода с един щифт, метода с термопластифициране и всички техники за кондензация.

Предимства:

- Лесна за миксиране паста – паста.
- Запечатва херметически.
- Не оцветява зъбните твърди тъкани.
- Не се разтваря от тъканните течности.
- Отлична биопоносимост.
- Добра рентгеноконтрастност.
- Време за работа 35 мин. при 23°C
- Време за втвърдяване 45 мин. при 37°C
- Не се свива при втвърдяването.

Състав:
База:

Epoxy oligomer resin	29%
Ethylene glycol salicylate	18%
Calcium phosphate	17%
Bismuth subcarbonate	26%
Zirconium oxide	10%

Катализатор:

Poly aminobenzoate	31%
Triethanolamine	5%
Calcium phosphate	29%
Bismuth subcarbonate	21%
Zirconium oxide	10%
Calcium oxide	4%



Опаковка: 13,5 гр. в двойна шприца (2:1 база и катализатор) - **60,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Приложение:

- При калцификации в канала.
- Твърде тесни канали на задни зъби.
- Премахване на замърсения слой.

Предимства:

- Готов за употреба гел с еднократни канюли.
- Водоразтворим.
- Лубрикира кореновия канал и позволява лесно проникване на инструмента.
- Улеснява оформянето на кореновия канал.
- Висок процент на EDTA, което осигурява добро почистване на замърсения слой и отпилките.
- Премахва органичните остатъци чрез хелация (EDTA-Ca^2).
- Отличен за работа с апекс локатор за по-добро отчитане.

Състав:

EDTA 19,0%

PEG 81,0%

Опаковка: 2 шприци (14 гр.), 10 канюли - **53,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



Приложение:

- Почистване и обработка на кореновия канал.
- При калцификация в канала.
- Тесни канали на задни зъби.
- Премахване на замърсения слой.

Предимства:

- Премахване на органични остатъци чрез хелация (EDTA-Ca^2).
- Лесно инструментiranje поради размекване на стената на дентиновия канал.
- Осигурява възможно най-чистите дентинови стени след премахване на замърсения слой.

Състав:

EDTA 83%

Water 17%

Опаковка: 100 мл - **20,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



Предимства:

- Отговарят на изискванията за размер и форма.
- Твърди, но гъвкави, за да осигурят идеални качества за работа.
- Латерална и вертикална кондензация.
- Еднороден и недеформиращ се кант.
- Отлична рентгеноконтрастност.

Композиция:

Gutta Percha Raw Material	22%
Zinc Oxide	61%
Barium Sulfate	15%
Titanium Dioxide	1%
Non Cadium Colorants	1%



Опаковка:

Тейпър 02 - 120 бр. - **9,00 лв**
 Тейпър 04 - 60 бр. - **13,00 лв**
 Тейпър 06 - 60 бр. - **13,00 лв**
 Милиметровани - 120 бр. - **10,00 лв**

Размери:

010	015	020	025	030	035	040	015-040	045-080
●	○	●	●	●	●	●	mix	mix

Производител: **Technical & General, Англия**

Предимства:

- Направени от специална силноабсорбираща хартия.
- Достатъчно твърди за поставяне, без да се завиват или огъват.
- Навити стегнато, така че да запазват формата си при изваждане.
- Стерилни.

Размери:

010	015	020	025	030	035	040	015-040	045-080
●	○	●	●	●	●	●	mix	mix



Опаковка:

Тейпър 02 - 200 бр. - **8,00 лв**
 Тейпър 04 - 60 бр. - **13,00 лв**
 Тейпър 06 - 60 бр. - **13,00 лв**

Производител: **Technical & General, Англия**

Канални инструменти

Предимства:

- Специална висококачествена неръждаема стоманена сплав с еднородна структура за максимална устойчивост и гъвкавост.
- Ръчна употреба с вътрешни ограничители.
- Могат да се стерилизират до 200°C / 390°F


Композиция:

Cr 16 – 18 %

Ni 06 – 10 %

Fe 73 – 78 %

Производител: **Technical & General, Германия**

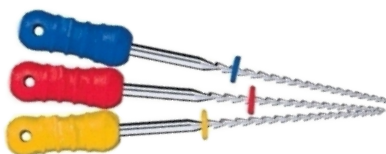

K- Files

Символ



Форма



Flexi- Files

Символ



Форма



Hedstroem Files

Символ



Форма



K- Reamers

Символ



Форма



Размери:

Дължина: 25 мм, 28 мм, 31 мм

006	008	010	015	020	025	030	035	040	15-40	45-80
									mix	mix

Опаковка: 1 блистер (6 бр.) - **12,00 лв**



- Висококачествена неръждаема стомана.
- Тип L с обезопасяваща пружинка.

Символ



Обезопасяваща
спирала



Форма



Размери:

Дължина: 21 мм, 25 мм

025	030	035	040	асорти



Опаковка: 1 блистер (4 бр.) - 13,00 лв



- Висококачествена неръждаема стомана.
- Стерилни.

Размери:

Дължина: 21 мм

000	001	002	003	004	005	006	асорти



Опаковка: 1 блистер (10 бр.) - 9,50 лв

Производител: Technical & General, Германия

Машинни разширители

- Висококачествена неръждаема стомана.
- На дръжката имат предопределена точка на счупване, така че при евентуално такова, инструментът може да се извади лесно.
- Размерът е маркиран върху дръжката.
- Препоръчителна скорост 800-1200 rpm.

Peeso enlargers



Размери:

001 / 070
002 / 090
003 / 110
004 / 130
005 / 150
006 / 170
001 - 006

Gates enlargers



Размери:

001 / 050
002 / 070
003 / 090
004 / 110
005 / 130
006 / 150
001 - 006

Опаковка: 1 бр. - **5,00 лв**

Производител: **Technical & General, Германия**



Приложение: отпечатьци за коронки и мостове, инлеи и онлеи.

- Висококачествен отпечатьчен материал от групата на адитивните силикони.
- Наличен като паста за ръчно смесване от база и катализатор,
- Подходящ за първичен отпечатьк.
- Наличен като regular, fast, soft версии.

Предимства:

- Лесна дозировка и лесно отстраняване от устата.
- Добра обемна стабилност и устойчивост при пластични деформации.
- Отлична смесимост.
- Много подходящ при двуфазни отпечатьци с putty light / fast.

Опаковка:

tgputty regular / soft / fast - 2 x 262 мл - **75,00 лв**

Комплект:

tgputty 2 x 262 мл + tgputty картуши 2 x 50 гр., 12 смесители - **135,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



tgputty light / light fast / medium / medium fast

Приложение:

- Изключителен материал за вторичен отпечатък от групата на адитивните силикони, в картуши за автоматично смесване.
- Предлага се във вариант със среден и бърз вискозитет и в монофазна версия.

Предимства:

- Отлична хидрофилност.
- Идеално течлив вискозитет.
- Добра устойчивост.

tgputty Monophase

Приложение:

- Монофазен отпечатъчен материал от групата на А-силиконите.
- Подходящ и за фиксиране на захапка.

Предимства:

- Възпроизвежда най-фините детайли на повърхността, което се дължи на неговата изключителна течливост, като остава твърд (непроменен) от вземането до отливането му.
- Лесно и прецизно приложение с помощта на интраорални накрайници.
- Добри тиксотропни свойства.

Опаковка:

tgputty light / light fast / medium / medium fast - 2 бр. картуши (100 гр.) - **66,00 лв**
tgputty monophase - 2 бр. картуши (100 гр.) - **66,00 лв**

Комплект:

tgputty 2 бр. x 262 мл + tgputty картуши 2 бр. x 50 гр., 12 смесители - **135,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Приложение:

- Картуши - 1:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1 - 50 мл.
- Картуши - 1:1 - 25 мл.

Предимства:

- Мултифункционален пистолет подходящ за всички видове картуши.
- Лесен и удобен за употреба, със сменяеми приставки за различните видове картуши.



Опаковка: 1 бр. пистолет, 5 бр. приставки - **134,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Приложение:

- Подходящ за картуши 1:1 - 50 мл



Опаковка: 1 бр. пистолет - **39,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Приложение:

Специално разработена формула на универсален лубрикант под формата на ръчен спрей.

Предимства:

- Многофункционален спрей за смазване.
- Специална формула за поддържане на ротативни инструменти с висока и ниска скорост, работни глави и въздушни мотори.
- Издържа налягане по-голямо от 100 000 PSI.
- Издържа високите температури на автоклавиране.
- Почиства замърсявания от наконечника.
- Увеличава „живота“ на турбината.
- Безопасен за персонала и пациентите.
- Съдържа следи от мента за свеж аромат.
- Универсална глава, подходяща за употреба с всички видове дюзи.

Опаковка: 500 мл - **35,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия




Състав:

Естествен каучук, стабилизатори, ванилова есенция, цинков оксид, сяра, катализатори, оцветител C.I. зелено 7, топлинни активатори.

Типични свойства:

Якост при опън	26mра
Модул при 500% разтегляне	2,9mра
Удължение при скъсване	820%
Якост на разкъсване	70n/mm

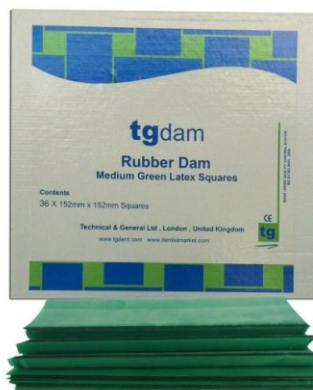

Опаковка: 36 бр. платна - 152 мм x 152 мм / дебелина 0,18 - 0,23мм - **26,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

tgProphy paste с аромат на мента без флуорид

- Ароматизирана професионална паста за процедури по почистване на петна, полиране, отстраняване на плака и остатъци, като част от лечението и профилактиката на кариес.
- Формулата съдържа подобрени абразиви за улесняване отстраняването на зъбната плака.

Опаковка: 200 гр. - **20,00 лв**

Производител: **Technical & General, Англия**



Четки за полиране




- Изкуствен / естествен косъм

Опаковка:

1 бр. - **1,00 лв**

100 бр. - **80,00 лв**

Гуми за полиране

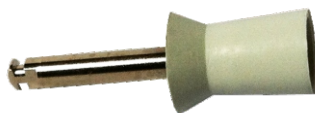

- Чашковидна форма

Опаковка:

1 бр. - **0,50 лв**

100 бр. - **40,00 лв**

Телескопична четка за почистване на инструменти

- Под формата на телескопична писалка.
- Месингова телена четка с пластмасова дръжка.
- Удължава се чрез завъртане на главата на пластмасовата дръжка.

Опаковка: 1 бр. - **20,00 лв**

Производител: **Technical & General, Англия**



Стерилизирани дентални игли за еднократна употреба.

Предимства:

- Скосени супер остри върхове.
- Заоблени режещи ръбове.
- Хирургически канюли от неръждаема стомана със силиконово покритие.
- Осигуряват плавно, почти безболезнено проникване.
- С резба по цялата дължина, осигуряваща максимална стабилност.
- Стерилизирани с етилен оксид.

Размери:

30G XXX	0,3x12 мм	■
30G XX	0,3x16 мм	■
30G X	0,3x21 мм	■
30G	0,3x24 мм	■
27G къси	0,4x24 мм	■
27G дълги	0,4x34 мм	■



Опаковка: 100 бр. - **15,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Приложение:

- Антисептични ефервесцентни таблетки за изплакване на устата и гаргара.

Предимства:

- Много ефективни за почистване на устата, тъй като съдържат натриев бензоат.
- Добавените ПАВ са ефективни при премахване на отпилки и остатъци по време и след лечение.
- Четири аромата: портокал, мента, тимол, джоджен.

Състав:

Активни съставки:

Sodium Benzoate B.P 0.92 %

Pot Benzoate B.P 0.76%

Ефервесцентна основа:

Bicarbonate of Soda 52.90%

Citric Acid 16.11%



Опаковка: 1000 бр. таблетки - **30,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



Приложение:

- Стерилизация на дентални инструменти и изделия.
- Имат двойно залепващ край за допълнителна здравина и приспособление за лесно отваряне.

Предимства:

- Може да се ползва при стерилизация с пара, както и с етиленов оксид
- Самозалепване с оцветен в зелено прозорец.
- Наличие на сертификат за стерилност.

Инструкции и употреба:

- Поставете инструментите и изделията, които ще се подлагат на стерилизация в плика и залепете.
- Стрелките се преоцветяват в кафяво при стерилизация под пара и в жълтокафяво при етиленова окисна стерилизация.

Опаковка:

- 200 бр. - размер 90 мм x 260 мм - **21,50 лв**
- 200 бр. - размер 135 мм x 290 мм - **34,00 лв**
- 200 бр. - размер 90 мм x 135 мм - **15,00 лв**
- 200 бр. - размер 190 мм x 360 мм - **49,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



Приложение:

- Предназначени за почистване и дезинфекция на твърди повърхности, включително медицинска и стоматологична мебелировка, оборудване и неинвазивни медицински изделия.
- За употреба в общи кабинети, ветеринарни кабинети, болници, клиники и всички места, където може да има риск от кръстосана инфекция.
- Свеж лимонов аромат.
- Не съдържа алкохол.

Ефективен спектър:

Ефективно бактерицидно / фунгицидно действие HBV, HCV, HIV, туберкулоза. Клостридиум дифисил NCTC 11204, образуване на вегетативни клетки (растящи клетки) на Грам - положителни организми към стандартния BS EN 13704. Устойчив на метицилин стафилококус ауреус, Е. коли, псевдомонас аеругиноза и широк спектър от микроорганизми.

Състав:

45 g Ethanol 94%
1 g Chlorhexidine digluconate 0.2%
0.99 g Quaternary Amonium Compounds
15 g Isopropanol
Perfume Aroma

Опаковка:

100 бр. в кутия - 185 x 135 мм - **9,00 лв**
100 бр. пълнител - 185 x 135 мм - **8,20 лв**
200 бр. в кутия - 200 x 210 мм - **19,70 лв**
200 бр. пълнител - 200 x 210 мм - **17,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

**Приложение:**

- За обща дезинфекция на повечето твърди повърхности, включително работни повърхности, метални повърхности, операционни лампи и повърхности.
- Не съдържа алдехиди.

Ефективен спектър:

- Ефективно бактерицидно / фунгицидно действие за 1 минута.
- HBV / HIV активен за 30 секунди.
- Туберкулоциден за 5 минути.
- Устойчив на метицилин - стафилококус ауреус, Е. коли, Псеудомонас аерутиноза.
- Широк спектър от микроорганизми.

Инструкции за употреба:

Напръскайте с концентрирания разтвор върху повърхността, оставете да реагира и леко подсушете, ако е необходимо. Да се използва само върху повърхности съвместими със спирт.

Състав:

45g Ethanol	94%
15g Propanol	3.5%
17g Chlorhexidine	2.5%

Опаковки:

500 мл спрей - **11,00 лв**
5 л. в туба - **61,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



Концентрат с високо ниво на дезинфекция.

Приложение:

- Високо ефективен почистващ, дезинфекциращ продукт за всички типове „студени“ инструменти.
- Без алдехиди.
- > 99 % биоразтворим.
- Може да се използва в ултразвукови вани за почистване.
- Може да се използва в 2 % или 4 % разтвор.

Ефективен спектър:

- HIV, HBV - при престой 15 мин. (2 % разтвор).
- Бактерициден, фунгициден и широк спектър от микроорганизми при престой 60минути (2 % разтвор) и 30 мин. (4 % разтвор).
- Туберкулоза - престой 60 мин. (2 % разтвор).

Инструкции за употреба:

Разтворете 20 или 40 мл в един литър топла вода в подходящ контейнер. Подменяйте развора веднъж седмично или по - често, ако е необходимо. Пазете далеч от досега на деца. Да не се поглъща.

Състав:

Aqua	15%
Benzalkonium Chloride	20-30%
Didecyldimonium Chloride	5-10%
Isopropyl Alcohol	10-20%
Chlorhexidine Digluconate	<2%
Hydroxyethylcellulose	20%
Cocamidopropyl Betaine	25%
Parfum	<1%

Опаковка:

2 литра - **47,50 лв**
5 литра - **93,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



Приложение:

- Високоэффективен, некоррозивен, дезинфекциращ и почистващ разтвор за ротационни инструменти.
- Безвреден за околната среда и биоразтворим.

Предимства:

- Готов за употреба.
- Не съдържа алдехиди.
- Подходящ за диамантени / стоманени борери, полиращи фрези и други ротационни инструменти.

Ефективен спъктер:

- HIV, HBV - 5 минути.
- Бактерии, гъби и широк спектър от микроорганизми - 5 минути.
- Туберкулоза - 5 минути.

Инструкции за употреба:

- Сменяйте разтвора всяка седмица или по - често, ако е необходимо.
- Пазете от деца.
- Да не се поглъща.
- Да се изхвърля на подходящи за това места..

Състав:

Isopropanol	25-35 %
Chlorhexidine Digluconate	01- May
Alkyl Benzyl Ammonium Chloride	< 1.0
Triethanolamine	
Benzotriazole	< 1.0

Опаковка: 2 литра - 29,00 лв

Производител: Technical & General, Англия

Дезинфектант за почистване и поддръжка на аспираторни системи

Приложение:

- Високоэффективен почистващ и дезинфекциращ продукт за всички видове аспирационно оборудване.
- Може да се използва за ефективно почистване и дезинфекция на плювалника и аспиратора за амалгама.

Ефективен спектър:

Ефективен срещу бактерии, гъби, вируси и широк спектър от микроорганизми.

Инструкции за употреба:

- Пригответе 5 % разтвор (50 мл в 950 мл топла вода).
- Аспирирайте чрез всмукателните тръби с голям и малък обем, сложете също и в плювалника. Оставете минимум 10 минути, за да активирате работните свойства. Изплакнете старателно с чиста вода.
- Не се пени.
- Неабразивен.
- Не съдържа Phenol.
- Не съдържа алдехиди.
- Не съдържа хлор.
- Има цветова кодировка.

tgdaily



Състав:

Alkyl Dimethyl Ammonium Chloride
Tetra Sodium Ethlenediamine
Tetra acetate
Fatty Acid Amido Alkyl Betaine

Опаковка:

1 литър - **30,00 лв**

5 литра - **60,00 лв**

tgweekly



- Отстранява протеините и органичните остатъци.

Състав:

Alkyl Dimethyl Ammonium Chloride
Tetra Sodium Ethlenediamine
Tetra acetate
Methanoic Acid
Fatty Acid Amido Alkyl Betaine

Опаковка:

1 литър - **30,00 лв**

5 литра - **65,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия



Приложение:

Хирургическо почистване и дезинфекция на ръцете.

Предимства:

Готов за употреба.

Предотвратява възникването на инфекция.

Оставя кожата на ръцете мека и нежна.

Дезинфекция с високо качество.

Инструкции за употреба:

Нанесете приблизително 6 мл от почистващото средство върху мокри ръце.

Разнесете разтвора върху цялата ръка старателно и търкайте в продължение на 60 секунди. Добавете вода, за да получите пяна. Използвайте четка, за да почистите областта на ноктите. Изплакнете старателно под течаща вода.

Състав:

Ethanol

Chlorhexidine digluconate 4%

Sodium lauryl sulphate 2.7 %

Diethanolamide

Опаковка:

500 мл - **9,00 лв**

5 литра - **49,00 лв**

Производител: Technipl & General, Англия



Приложение:

Универсална дезинфекция на алгинати, силикони, полиетерни и гипсови отпъчатъци.

Предимства:

Готов за употреба.

Без алдехиди.

Бактерицидно и фунгицидно действие.

Инактивация на HIV, HBV, папова-вирус и полиомиелитен вирус.

Инструкции за употреба:

Напръскайте директно, така че да покрие целия отпъчатък. Оставете да изсъхне.

Опаковка:

500 мл спрей - **16,30 лв**

5 литра в туба - **75,00 лв**

Производител: Technical & General, Англия

Контакти:

Централен офис

гр. София, ул. Проф. Г. Брадистилев № 4

тел.: 02 / 423 03 87

моб.: 0889 89 50 23

e-mail: tgdent@abv.bg

Магазин - **10 % отстъпка при покупка на място**

гр. Пловдив, пл. Понеделник пазар № 5,

ДКЦ 1 - Пловдив, ет. 4

тел.: 0988 934 675